

Manutenção rápida e fácil – A vantagem da Inogen.

INOGEN ONE^{G4} Guia de substituição de colunas



O seu fornecedor do equipamento:

O seu médico:




326 Bollay Drive,
Goleta, CA 93117
1-877-4-INOGEN (Chamada gratuita)
1-877-446-6436 (Chamada gratuita)
1-805-562-0515 (Internacional)
info@inogen.net
www.inogen.com

96-06731-04-01-B




INOGENONE^{G4}

Para substituir as colunas no seu Inogen One G4:


- 1 Desligue o concentrador Inogen One[®] G4 premindo o botão de alimentação  para desligar o aparelho.
- 2 Retire o concentrador Inogen One[®] G4 da mala de transporte (se aplicável).




3 Retire a bateria do concentrador Inogen One[®] G4.

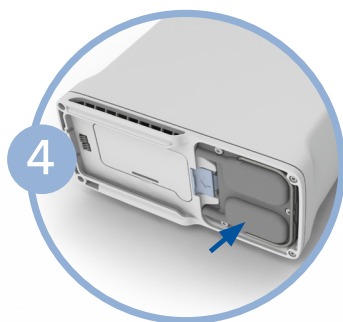


4 Deite primeiro o concentrador Inogen One[®] G4 de lado de forma a que a parte de baixo fique visível. O conjunto de colunas de metal pode ser visualizado num lado do aparelho.

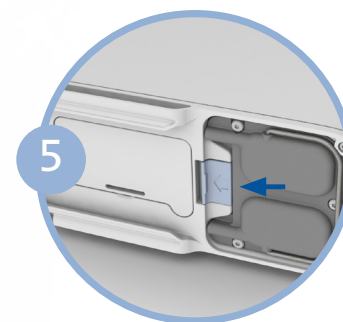


5 Desbloqueie o conjunto de colunas ao premir o botão de fecho afastando-o das colunas.

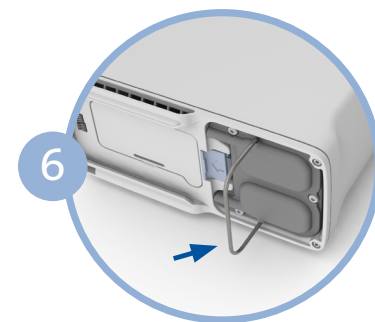


6 Enquanto mantém o botão aberto, deslize o conjunto de colunas extraíndo-o do aparelho ao puxar pela pega da coluna.

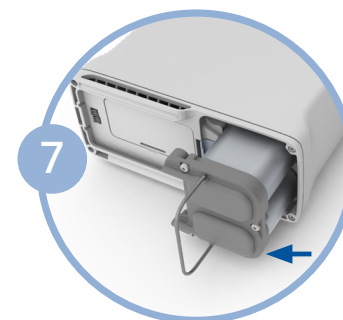


7 Retire completamente as colunas do Inogen One[®] G4. Ambas as colunas são removidas como se fossem uma peça.

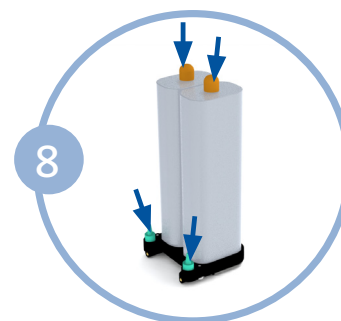

8 Retire os tampões antipoeiras do novo conjunto de colunas. Certifique-se de que não existem poeiras ou resíduos nos locais onde estavam colocados os tampões antipoeiras.

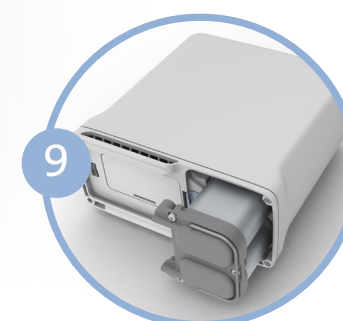

9 Insira o conjunto de colunas no concentrador Inogen One[®] G4. Não deixe as extremidades da coluna expostas; o conjunto de colunas deve ser inserido no Inogen One G4 assim que os tampões antipoeiras tiverem sido removidos.

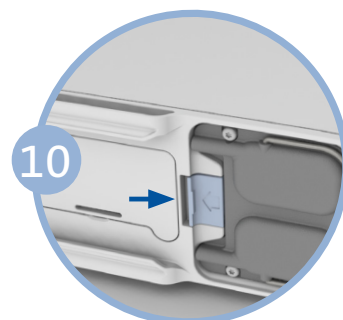

10 Empurre o conjunto de colunas para dentro do aparelho de modo que as colunas fiquem completamente assentes no concentrador Inogen One[®] G4. O botão de fecho acionado por mola deve regressar completamente à posição fechada.


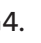


11 Ligue o cabo de alimentação de CA ao Inogen One[®] G4 e ligue o cabo de alimentação de CA da fonte de alimentação a uma tomada elétrica. Não ligue o concentrador Inogen One[®] G4.

CONTINUA NO VERSO →

NOTA As instruções de substituição da coluna destinam-se apenas a ser utilizadas quando for necessário proceder à manutenção e não se devem tornar numa rotina.



13 Prima o botão de alerta/campainha  uma vez até o ecrã apresentar "sieve reset success" (reposição do filtro bem sucedida). Prima o botão de alimentação  para ligar o Inogen One[®] G4. Em seguida, pode utilizá-lo normalmente.



12 Prima e mantenha premido os botões de mais (+) e menos (-) durante 5 segundos. O ecrã apresenta a mensagem "sieve reset" (reposição do filtro). Solte os botões assim que a mensagem for apresentada no ecrã.